


Procédure n ° 1	Indice n° 0		Page 1/2
Baxter	Prise en charge d'un patient lors d'une séance sur cycleur de dialyse péritonéale automatisée HomeChoice		Date de mise en application Mars 99
Objectif	Posséder une technique performante pour la connexion, la déconnexion et la surveillance d'une séance de dialyse péritonéale automatisée sur cycleur HomeChoice . Cette technique est utilisée dans le cadre de la prise en charge des patients insuffisants rénaux traités en dialyse péritonéale en urgence ou en chronique dans un service hospitalier (repli, démarrage).		
Contenu de la procédure	Cette procédure décrit l'enchaînement des gestes techniques et des règles d'asepsie pour la connexion, la surveillance et la déconnexion du cycleur de dialyse péritonéale automatisée HomeChoice .		
Textes réglementaires	Textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles et aux actes professionnels régissant l'exercice de la profession infirmière (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 et décret n° 93-345 du 15 Mars 1993).		
Structures concernées	Toutes les unités fonctionnelles, la pharmacie centrale et le service biomédical		
Fonctions	Médecins, cadre de soins, Infirmières		
Matériels utilisés selon système	Matériel commun : Le HomeChoice , Poches de solution pour dialyse péritonéale Poches de drainage ou ligne d'extension		
	<p style="text-align: center;">Connexion patient à vis</p> <p>1 ligne à 4 ou 8 branches pour système HomeChoice , 1coquille de protection bétadinée type R 1 Minicap ou 1 bouchon bétadiné 1 Opticap</p>	<p style="text-align: center;">Connexion patient à perforateur U.V.Flash</p> <p>1 ligne à 4 branches pour système HomeChoice , connexion à perforateur U.V. 1 collier de serrage UV-FLASH, 1 bouchon de déconnexion UV-FLASH 1chambre et 1 transformateur U.V</p>	
Documentation associée	Guide pour l'instructeur HomeChoice Le petit précis Protocoles de connexion (N°1), surveillance (N°2) et déconnexion (N°3) Recueils d'évaluation de la qualité des protocoles de connexion (annexe N°1), de surveillance (annexe N°2) et de déconnexion (annexe N°3)		
Commentaires	La connexion, la déconnexion et la surveillance d'une séance de dialyse péritonéale automatisée ne peut se faire que sur prescription médicale, nominative, qualitative, quantitative, datée et signée par le médecin prescripteur.		
Rédaction	Vérification	Approbation Affaires réglementaires	
Nom : D. Maurice, B. Glathoud Infirmières conseil	Nom : D. Frère Chef de produit	Nom : M.D. Moulin Pharmacien	
Visa	Visa	Visa	

Procédure n ° 1	Indice n° 0	Page 2/2
Baxter	Prise en charge d'un patient lors d'une séance sur cycleur de dialyse péritonéale automatisée HomeChoice	Date de mise en application Mars 99

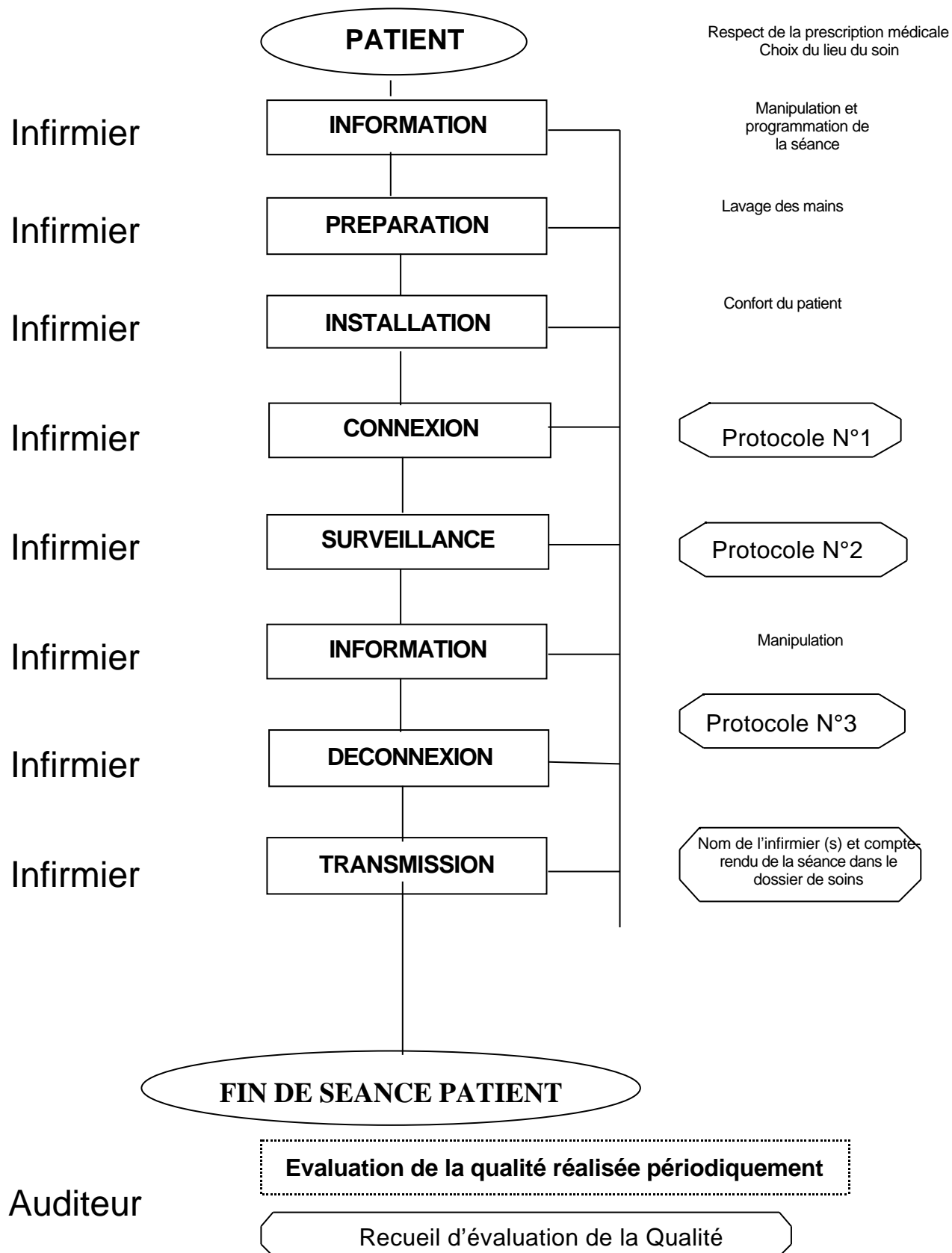

Date : Mars 1999

36 points de validation

PREPARATION (Guide de l'instructeur : chapitre " Le traitement " page 2.2 à 2.4)

- 1 Installer le système HomeChoice™
- 2 Rassembler le matériel nécessaire en fonction de la connectologie du patient
- 3 Vérifier les poches de dialysat
- 4 Placer la poche sur le réchauffeur
- 5 Placer les autres poches près du HomeChoice™

PROCEDURE D'INSTALLATION (Guide de l'instructeur chapitre " Le traitement " page 2.5 à 2.15)**ETAPE N°1** : Mise en route du HomeChoice™

- 6 Connecter le cordon au secteur
- 7 Basculer l'interrupteur en position " Marche "
- 8 Commencer la procédure : message " vert pour démarrer " à l'écran
- 9 Vérifier et/ou modifier le programme en fonction de la prescription médicale

ETAPE N°2 : Installation de la ligne de branchement

- 10 Préparer la ligne de branchement
- 11 Préparer l'option drainage
- 12 Appuyer sur la touche verte, message : " Installer les lignes " à l'écran
- 13 Ouvrir la porte
- 14 Charger la cassette
- 15 Fermer la porte
- 16 Accrocher le présentoir
- 17 Relier l'option drainage

ETAPE N°3 : Connexion des poches de dialysat

- 18 Appuyer sur la touche verte, message : " Connecter les poches " à l'écran
- 19 Mettre le masque (IDE et patient) et se laver les mains
- 20 Connecter la poche réchauffeur (ligne clamp rouge du présentoir)
- 21 Casser la canule
- 22 Connecter les autres poches nécessaires au traitement (lignes clamp blanc)
- 23 Casser les canules
- 24 Si l'option dernière injection est de concentration différente, s'assurer que la ligne clamp bleu est connectée à la poche de dernière injection
- 25 Vérifier les connexions

ETAPE N°4 : Amorçage des lignes

- 26 Ouvrir les clamps des lignes connectées
- 27 Ouvrir le clamp de la ligne patient
- 28 Appuyer sur la touche verte et attendre le signal sonore et visuel de connexion patient

ETAPE N°5 : Connexion du patient à la ligne de branchement

- 29 Préparer l'extension de cathéter
- 30 Se laver les mains (lavage antiseptique)
- 31 Retirer la ligne patient du présentoir, enlever le protecteur de stérilité.
- 32 Enlever le bouchon de protection de l'extension de cathéter, connecter le patient, mettre la coquille de protection bétadinée
- 33 Ouvrir le clamp de l'extension de cathéter
- 34 Appuyer sur la touche verte, la séance commence

TRANSMISSION

- 35 Remplir le dossier de soins
- 36 Dater et signer nominativement les différents documents.

Date : mars 1999

10 points de validation

INFORMATION DU PATIENT SUR LES DIFFERENTS ELEMENTS DE SURVEILLANCE DE LA SEANCE

- 1 Contrôle du dialysat : vérifier la limpidité du dialysat drainé au moment du drainage initial
- 2 Contrôle de l'équilibre hydrique
Volume de drainage initial
UF réalisée pendant la séance de dialyse
- 3 Contrôle du temps d'échange prescrit
Temps de stagnation moyen

SURVEILLANCE DU PATIENT SELON LES HABITUDES DU SERVICE

- 4 Bon niveau de sommeil ou de repos
- 5 Absence de douleurs à l'injection
- 6 Absence de douleurs au drainage

GESTION DES ALARMES

- 7 Se référer au chapitre " les alarmes " du guide de l'instructeur (page 4.1 à 4.22)
- 8 Répertorier les alarmes et la procédure que vous avez suivi

TRANSMISSIONS

- 9 Remplir le dossier de soins
- 10 Dater et signer nominativement les différents documents.

Date : mars 1999

14 points de validation

Fin de traitement (Guide de l'instructeur leçon 21 chapitre " Le traitement " page de 2.16 à 2.18)

RECUEILS DES INFORMATIONS DE FIN DE SEANCE

- 1 Appuyer sur la flèche vers le bas pour récupérer les informations de la séance " Fin de traitement " (Volume de drainage initial, ultrafiltration totale, temps de stagnation moyen, temps de stagnation perdue ou gagnée).
- 2 Appuyer sur la touche verte, message " Fermer les clamps " à l'écran

DECONNEXION DU PATIENT DE LA LIGNE DE BRANCHEMENT

- 3 Fermer le clamp de l'extension de cathéter et les clamps de la ligne de branchement.
- 4 Appuyer sur la touche verte, message " Déconnectez-vous, SVP " à l'écran
- 5 Mettre un masque (IDE, patient), se laver les mains
- 6 Ouvrir un nouveau bouchon bétadiné
- 7 Déconnecter le patient en utilisant une technique aseptique, placer immédiatement le bouchon de déconnexion
- 8 Oter la ligne de branchement (ouvrir la porte, retirer la cassette, fermer la porte).
- 9 Appuyer sur la touche verte message : " Eteindre le cycleur " à l'écran
- 10 Eteindre le HomeChoice .
- 11 Ranger le matériel
- 12 Compléter le cahier de suivi(calcul de l'ultrafiltration des 24 heures, pression artérielle, poids du patient)

TRANSMISSION

- 13 Remplir le dossier de soins
- 14 Dater et signer nominativement les différents documents.

RECUEIL D'EVALUATION DE LA QUALITE

CONNEXION AU HOMECHOICE

Nom du patient : Date de la connexion : N° du HomeChoice™ : N° de lot de la ligne : N° de lot des poches :	Dr : Prescription écrite : oui non			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">OUI</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">NON</th> <th style="width: 34%; text-align: center;">Observations</th> </tr> </thead> </table>	OUI	NON	Observations
OUI	NON	Observations		
<p>Le patient a-t-il reçu :</p> <p style="padding-left: 20px;">Les informations sur le déroulement de la séance de dialyse Les informations sur le déroulement de la manipulation</p> <p>Préparation</p> <p style="padding-left: 20px;">Lavage des mains effectué. Préparation et vérification du matériel nécessaire à la manipulation Vérification de la programmation du HomeChoice</p> <p>Connexion</p> <p style="padding-left: 20px;">Respect du protocole N°1 Lavage antiseptique des mains réalisé (nom du savon antiseptique). Règles d'asepsie respectées</p> <p>Transmission</p> <p style="padding-left: 20px;">Date et heure de connexion notée sur le cahier de suivi et sur le dossier de soins</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> </tbody> </table>			
Les observations du patient sont notées : Si oui, lesquelles ?				
Nom de la personne qui a effectué la connexion : Fonction : Date :				
Visa :				

RECUEIL D'EVALUATION DE LA QUALITE

SURVEILLANCE DE LA SEANCE DE DIALYSE SUR HOMECHOICE

Nom du patient : Date de la connexion : N° du HomeChoice : N° de lot de la ligne : N° de lot des poches :	Dr : Prescription écrite oui non			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">OUI</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">NON</th> <th style="width: 34%; text-align: center;">Observations</th> </tr> </thead> </table>	OUI	NON	Observations
OUI	NON	Observations		
<p>Le patient a-t-il reçu les informations sur les différents éléments de surveillance de la séance</p> <p>Surveillance du patient effectuée.</p> <p>Bon fonctionnement du HomeChoice™ vérifié</p> <p>Alarmes du HomeChoice et procédures d'intervention notées.</p> <p>Règles d'asepsie respectées.</p> <p>La surveillance a lieu plusieurs fois au cours du traitement</p>				
Les observations du patient sont notées Si oui, quelles sont-elles ?				
Nom de la personne qui a effectué la surveillance : Fonction : Date :				
Visa :				

RECUEIL D'EVALUATION DE LA QUALITE

DECONNEXION DU HOMECHOICE

Nom du patient : Date de la connexion : N° du HomeChoice : N° de lot de la ligne : N° de lot des poches :	Dr : Prescription écrite oui non			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">oui</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">non</th> <th style="width: 34%; text-align: center;">Observations</th> </tr> </thead> </table>	oui	non	Observations
oui	non	Observations		
<p>Le patient a-t-il reçu :</p> <p style="padding-left: 20px;">Les informations sur le déroulement de la séance de dialyse Les informations de fin de séance</p> <p>Préparation</p> <p style="padding-left: 20px;">Lavage des mains effectué. Préparation et vérification du matériel nécessaire à la manipulation</p> <p>Déconnexion</p> <p style="padding-left: 20px;">Respect du protocole N°3 Lavage antiseptique des mains réalisé (nom du savon antiseptique). Règles d'asepsie respectées Aspect du dialysat observé</p> <p>Transmission</p> <p style="padding-left: 20px;">Date et heure de la déconnexion notée sur le cahier de suivi et sur le dossier de soins</p>				
Les observations du patient sont notées : Si oui, quelles sont-elles ?				
Nom de la personne qui a effectué la déconnexion Fonction : Date :				
Visa :				