


Procédure n ° 3	Indice n° 0	Page 2/2
Baxter	Prise en charge d'un patient lors d'un échange de dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.) avec le système déconnectable intégré (double poche)	Date de mise en application Août 99

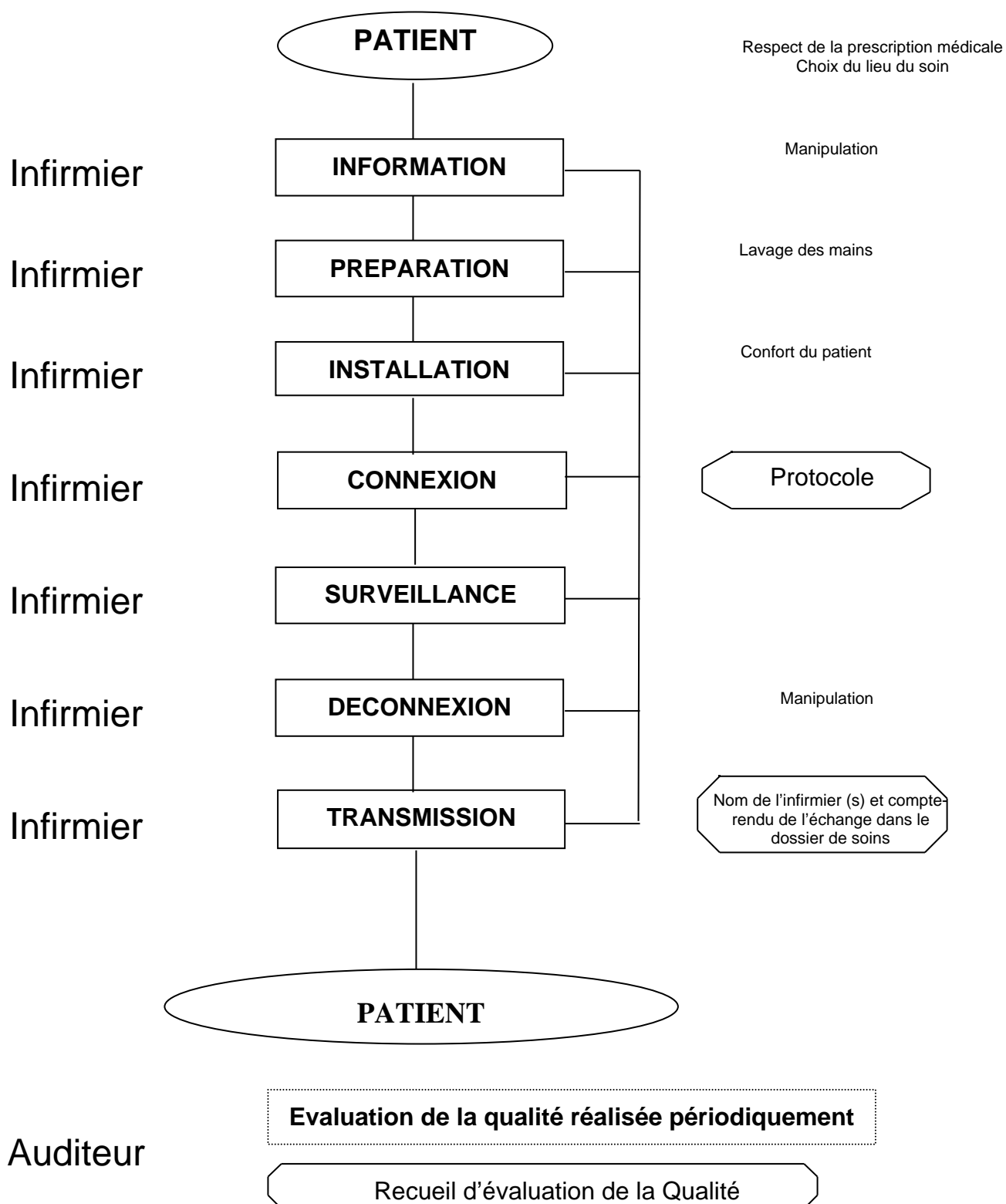

Date : Août 1999

34 points de validation

INFORMATION

1. Informer le patient sur le déroulement l'échange

INSTALLATION DU MATERIEL

2. Fermer portes et fenêtres
3. Nettoyer le plan de travail
4. Installer le matériel nécessaire
5. Mettre un masque (IDE et patient)

PREPARATION DE LA POCHE NEUVE

6. Se laver les mains
7. Enlever le suremballage de la poche préalablement réchauffée sans toucher le protecteur de stérilité
8. Effectuer les vérifications d'usage (prescription médicale, péremption, limpidité, intégrité de la poche, adhésion du protecteur de stérilité)

CONNEXION

- 9 Placer la double poche sur le plan de travail, poche vide et lignes sur le dessus
10. Ouvrir l'emballage de la coquille
11. Sortir le Miniset
12. Se laver les mains
13. Saisir le Y d'une main et ôter l'embout de stérilité de l'autre main
14. Saisir l'extension de cathéter et ôter le bouchon bétadiné
15. Effectuer la connexion, sans vriller le cathéter
16. Positionner la coquille bétadinée et la faire pivoter trois fois

DRAINAGE

17. Mettre la poche vide en position de drainage sur un support (crochet de drainage ou champ papier), peser la poche pleine et la suspendre à la potence
18. Ouvrir le clamp intégré: le drainage s'effectue
19. S'assurer de l'absence de douleur et de fuite de dialysat
20. A la fin du drainage fermer le clamp intégré
21. Mettre un clamp sur la ligne de drainage

FLUSH

22. Casser la canule sécable de la ligne d'injection
23. Ouvrir le clamp et compter jusqu'à 10 secondes
24. Reclamer la ligne de drainage

INJECTION

25. Ouvrir le clamp intégré: l'injection s'effectue
26. A la fin de l'injection, fermer le clamp intégré
27. Mettre un clamp sur la ligne d'injection

DECONNEXION

28. Remettre un masque
29. Ouvrir l'emballage du Minicap
30. Se laver les mains
31. Déconnecter le système
32. Mettre le Minicap

TRANSMISSION

33. Peser et mirer la poche
34. Remplir le dossier de soins

